



	Doseersysteem	Viscositeit laag hoog	Afdruktechniek	Aanbevolen max. verwerkingstijd (min:sec)	Intra-orale uithardingstijd bij 37°C (min:sec)
Zeer snel uithardende afdrukmaterialen					
3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick			Monofase of 1-stap	0:45	2:00
3M™ Impregum™ Super Quick			1-stap	0:45	2:00
Snel uithardende afdrukmaterialen					
3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ Quick			1-stap	1:00	3:00
3M™ Impregum™ Penta™ Soft Quick			Monofase	1:00	3:00
3M™ Impregum™ L DuoSoft™ Quick			1-stap	1:00	3:00
Normaal uithardende afdrukmaterialen					
3M™ Impregum™ Penta™ Soft			Monofase	1:45	4:15
3M™ Impregum™ Penta™			Monofase	1:45	4:15
3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™			1-stap	1:45	4:15
3M™ Impregum™ Penta™ L DuoSoft™			1-stap	1:45	4:15
3M™ Impregum™ Garant™ L DuoSoft™			1-stap	1:45	4:15

Bestelinformatie

Artikelnr. Productinformatie

Artikelnr.	Productinformatie
Intro Kits voor 3M™ Pentamix™ 3 Automatisch mengapparaat	
69383	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body 1 base paste MB – 300 ml, 1 catalyst MB – 60 ml, 1 3M™ Penta™ Cartridge MB, 10 3M™ Penta™ Mengtips – Rood, 1 3M™ Penta™ Elastomeerspuit, 1 Polyether Lepeladhesief – 17 ml, 3 3M™ Astringent Retraction Paste capsules
69381	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body/Light Body 1 base paste MB – 300 ml, 1 catalyst MB – 60 ml, 2 cartridges LB – 50 ml p/stuk, 1 3M™ Penta™ Cartridge MB, 10 3M™ Penta™ Mengtips – Rood, 5 3M™ Intra-orale Spuitjes Paars, 5 3M™ Garant™ Mengtips Paars, 5 3M™ Garant™ Intra-orale Tips Wit, 1 Polyether Lepeladhesief – 17 ml, 3 3M™ Astringent Retraction Paste capsules, 6 3M™ Afdruklepels
P31734	3M™ Impregum™ Penta™ Soft 1 base paste – 300 ml, 1 catalyst – 60 ml, 1 3M™ Impregum™ Penta™ Soft Cartridge, 10 3M™ Penta™ Mengtips – Rood, 1 3M™ Penta™ Elastomeerspuit, 1 Polyether Lepeladhesief – 17 ml
P31684	3M™ Impregum™ Penta™ 1 base paste – 300 ml, 1 catalyst – 60 ml, 1 3M™ Impregum™ Penta™ Cartridge, 10 3M™ Penta™ Mengtips – Rood, 1 3M™ Penta™ Elastomeerspuit, 1 Polyether Lepeladhesief – 17 ml
P31770	3M™ Impregum™ Penta™ Soft Quick 1 base paste – 300 ml, 1 catalyst – 60 ml, 1 3M™ Impregum™ Penta™ Soft Quick Cartridge, 10 3M™ Penta™ Mengtips – Rood, 1 3M™ Penta™ Elastomeerspuit, 1 Polyether Lepeladhesief – 17 ml
P31738	3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ 1 base paste – 300 ml, 1 catalyst – 60 ml, 1 3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ Cartridge, 10 3M™ Penta™ Mengtips – Rood, 2 3M™ Impregum™ Garant™ L DuoSoft™ Cartridges – 50 ml p/stuk, 1 cartridge dispenser 1:1/2:1, 10 3M™ Garant™ Mengtips Wit, 10 3M™ Garant™ Intra-orale Tips Wit, 1 Polyether Lepeladhesief – 17 ml
P31772	3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ Quick 1 base paste – 300 ml, 1 catalyst – 60 ml, 1 3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ Quick Cartridge, 10 3M™ Penta™ Mengtips – Rood, 2 3M™ Impregum™ Garant™ L DuoSoft™ Cartridges – 50 ml p/stuk, 1 cartridge dispenser 1:1/2:1, 10 3M™ Garant™ Mengtips Wit, 10 3M™ Garant™ Intra-orale Tips Wit, 1 Polyether Lepeladhesief – 17 ml
Refills: 2 base pastes – 300 ml p/stuk, 2 catalysts – 60 ml p/stuk	
69385	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body Refill
31644	3M™ Impregum™ Penta™ Refill
31730	3M™ Impregum™ Penta™ Soft Refill
31764	3M™ Impregum™ Penta™ Soft Quick Refill
31740	3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ Refill
31768	3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ Quick Refill
31745	3M™ Impregum™ Penta™ L DuoSoft™ Refill

Artikelnr. Productinformatie

Artikelnr.	Productinformatie
Refills	
69379	3M™ Impregum™ Super Quick Light Body 4 cartridges – 50 ml p/stuk, 5 3M™ Intra-orale Spuitjes Paars, 5 3M™ Garant™ Mengtips Paars
31751	3M™ Impregum™ Garant™ L DuoSoft™ Refill 4 cartridges – 50 ml p/stuk, 5 3M™ Intra-orale Spuitjes Paars, 10 3M™ Garant™ Mengtips Wit
31766	3M™ Impregum™ L DuoSoft™ Quick Refill 4 cartridges – 50 ml p/stuk, 5 3M™ Intra-orale Spuitjes Paars, 10 3M™ Garant™ Mengtips Wit
3M™ Pentamix™ Automatische mengapparaten	
77871	3M™ Pentamix™ 3 Automatisch mengapparaat
77903	3M™ Pentamix™ Lite Automatisch Mengapparaat – 230 V 50 Hz INT incl. 1 3M™ Penta™ Cartridge
Cartridges voor 3M™ Pentamix™ 3 Automatisch Mengapparaat	
69387	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body Cartridge
P3787	3M™ Impregum™ Penta™ Soft Cartridge
P3792	3M™ Impregum™ Penta™ Cartridge
P3775	3M™ Impregum™ Penta™ Soft Quick Cartridge
P3793	3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ Cartridge
P3773	3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ Quick Cartridge
P3795	3M™ Impregum™ Penta™ L DuoSoft™ Cartridge
Toebehoren & Accessoires	
71507	3M™ Intra-orale Spuitjes Paars, 20 stuks
71508	3M™ Intra-orale Spuitjes Paars, 50 stuks
77580	Cartridge dispenser 1:1/2:1
77944	3M™ Penta™ Cartridge voor 3M™ Pentamix™ Lite Mengapparaat
77601	Wandbevestigingskit voor het 3M™ Pentamix™ 3 Mengapparaat
30600	Polyether Lepeladhesief – 17 ml
77949	3M™ Penta™ Mengtips – Rood, 50 stuks
71451	3M™ Garant™ Mengtips Wit, 50 stuks
71454	3M™ Garant™ Mengtips Paars, 50 stuks
71461N	3M™ Garant™ Intra-orale Tips Wit, 50 stuks



3M Belgium bvba/sprl
3M Oral Care
infodental.be@mmm.com
3M.be/OralCare

3M Nederland B.V.
3M Oral Care
infodental.nl@mmm.com
3M.nl/OralCare

3M™ Impregum™
Polyether Afdrukmetaal


Maak van elke
uitdaging een
eenvoudige casus.

De snelste route naar precisie, omdat uw tijd telt.

3M™ Impregum™ Super Quick.

Impregum Polyether afdrukmetaal is altijd de vertrouwde keuze geweest voor complexe situaties en implantaten. Zou het dan niet fijn zijn als u ook gegarandeerd bent van een accurate en gedetailleerde afdruk bij enkelvoudige casussen? Om tegemoet te komen aan de hoogste verwachtingen zonder productiviteit te verminderen, is Impregum Super Quick Polyether afdrukmetaal gemaakt.

Impregum Super Quick combineert het betrouwbare resultaat van polyether met de snelheid van VPS. Diepe marges en een vochtige omgeving zijn geen obstakel meer voor u.

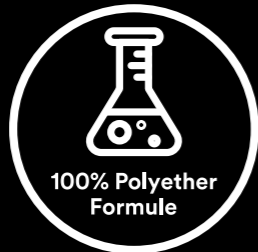

Vertrouwde precisie. Snellere uitharding.

Heel snel, maar ook heel goed. Met slechts twee minuten uithardingstijd zorgt het Super Quick metaal voor een snellere afdruk bij minder complexe casussen, zoals enkelvoudige kronen, implantaten, inlays/onlays en kleine bruggen tot 3 elementen.

Gemaakt voor succes.

Een échte polyether met een nieuwe formule die resulteert in een super snelle uithardingsreactie en een verbeterde smaak.

Meer comfort voor uw patiënten.

Een verbeterde, frisse mintsmaak gecombineerd met minder tijd in de mond verhogen het comfort van uw patiënt.

Polyether en de CAD/CAM workflow.

Impregum Super Quick is scanbaar met de huidige generatie mondschanners, zodat u efficiënt kunt samenwerken met uw lab.

“ Een snellere uithardende, beter smakend en extreem accuraat polyether afdrukmetaal. ”

Stephen J. Gordon, DDS
Tandarts in Millennium Park, Chicago (IL), VS



Omspuiten van 3M™ Impregum™ Super Quick Light Body afdrukmetaal met behulp van de paarse 3M™ Intra-Orale spuitjes.



Contrasterende kleuren voor uitstekende leesbaarheid.




3M™ Impregum™ Super Quick

- De eerste super snelle polyether met 45 seconden verwerkingstijd en 2 minuten uithardingstijd
- Beschikbaar in medium en light body samenstelling
- Voor monophasen en 1-staps afdruktechnieken
- Perfect voor afdrukken van enkelvoudige kronen, implantaten, inlays/onlays en kleine bruggen tot 3 elementen




3M™ Impregum™ Polyether Materiaal

Bewezen voordelen voor betrouwbare accuratesse.

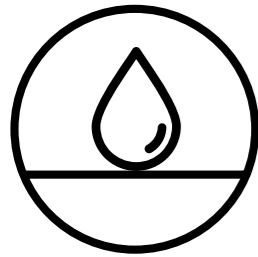


Vocht? Geen probleem!

Door de ongekeerde vochttolerantie verdringt Impregum Polyether Afdrukmetaal bloed en speeksel direct na het eerste contact met het weefsel, wat resulteert in een gedetailleerde en luchtbel-vrije reproductie. Dit is een groot voordeel in subgingivale casussen.

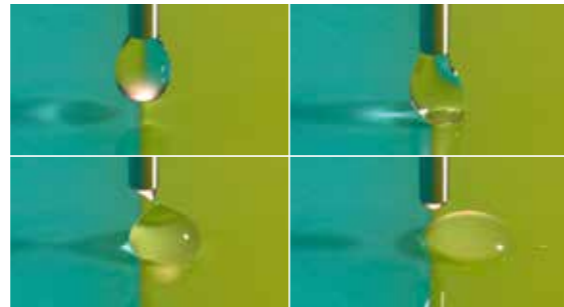

3M™ Impregum™ Polyether afdrukmetaal is intrinsiek hydrofiel waardoor het direct contact maakt met vochtige tanden en weefsel. De test wijst uit dat de waterdruppel aangetrokken wordt door het 3M™ Impregum™ Super Quick Afdrukmetaal met een hogere hydrofiliteit (rechts) en beweegt direct richting het metaal.

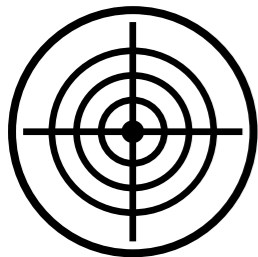

Ongeëvenaarde precisie.

De uitstekende vloeieigenschappen van Impregum Polyether Afdrukmetaal maken het mogelijk om elk detail vast te leggen. Het vloeit geleidelijk, zelfs op de meest lastig te bereiken plekken, waardoor het een luchtbel-vrije afdruk produceert met ongeëvenaarde precisie.




3M™ Impregum™ Polyether Afdrukmetaal vloeit dicht langs de tanden en het gingivale weefsel om elk belangrijk detail vast te leggen.




Neem alle tijd die u nodig heeft.

In tegenstelling tot VPS materiaal toont Impregum Polyether afdrukmetaal consistente vloeieigenschappen. U kunt vertrouwen op de aangegeven verwerkingstijd, waardoor u de kans op problemen door vroegtijdig uitharden elimineert. Nadat de verwerkingstijd is verstreken, start direct de uitharding. Dit verzekert u van een betere reproductie van details en minder vervormingen.

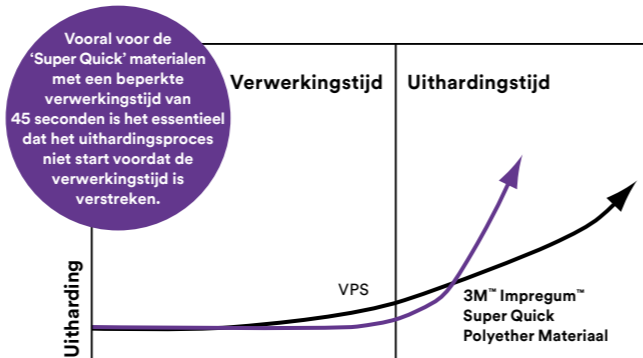

In tegenstelling tot VPS materiaal toont polyether materiaal een consistente vloeing gedurende de verwerkingstijd met direct daarna de uitharding (schematische illustratie).

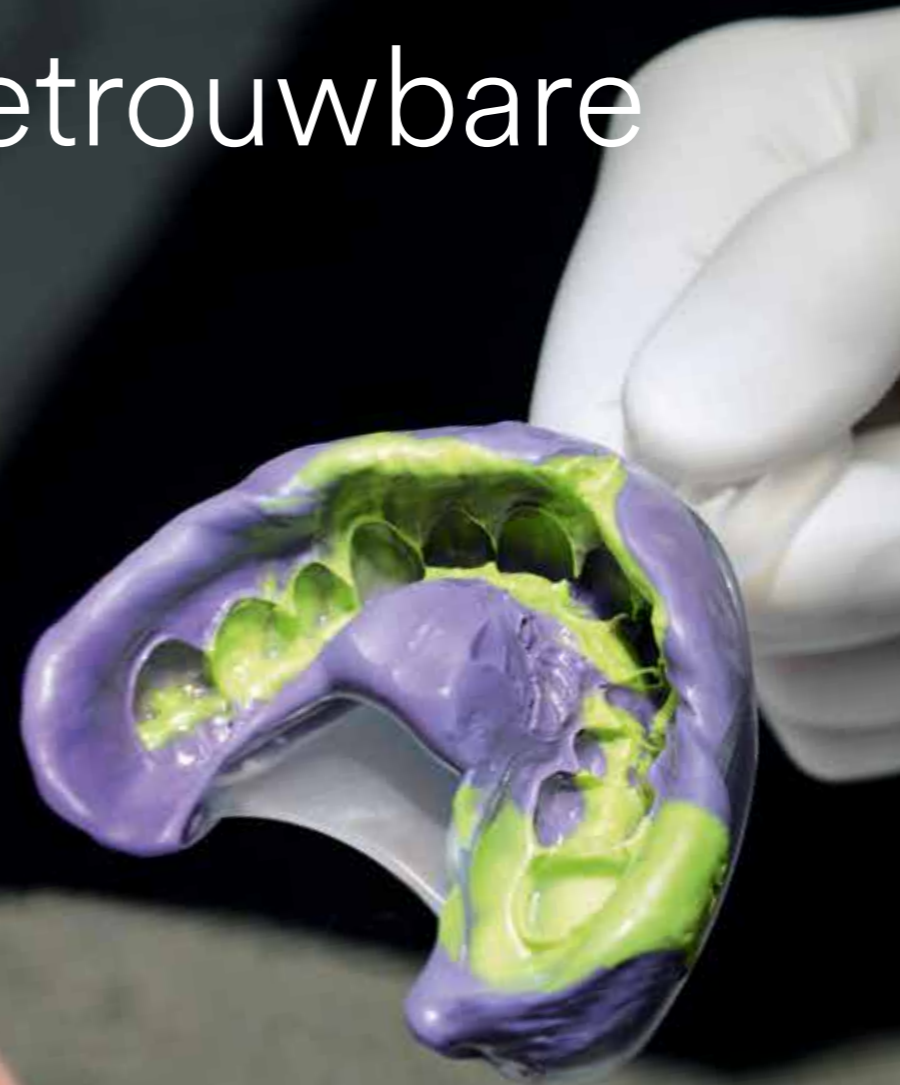

Vertrouwen

Een vertrouwd merk betekent een prettige ervaring voor alle betrokkenen.

- Bespaar tijd en geld met een zeer precieze afdruk bij de eerste poging.
- Verhoog uw efficiëntie en die van uw lab door herstelwerkzaamheden en aanpassingen te verminderen.
- Biedt meer comfort voor uw patiënt.

STERK Y AANBEVOLEN

door labs


Onderzoek toont aan dat Impregum Polyether Afdrukmetaal als hoogste aanbevolen wordt door labs in de V.S. en Europa.

Voor meer voorspelbare, precieze en gemakkelijke afdrukken.

Altijd de juiste keuze, welke indicatie of techniek u ook preferereert.

Indicaties	Afdruktechniek	Enkelvoudige kroon	Kleine implantaat (+/- 3 elementen)	Inlay/onlay	Veneer	Kleine brug (+/- 3 elementen)	Brug (>3 elementen)	Implantaat (>3 elementen)	Pick-up afdruk	Functionele afdruk	
Super snel uithardende afdrukmaterialen											
NIEUW 3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick (MB) 3M™ Impregum™ Super Quick (LB)	Monofase	✓	✓	✓	✓	✓					
	1-stap										
Snel uithardende afdrukmaterialen											
3M™ Impregum™ Penta™ Soft Quick (MB) 3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ Quick (HB) 3M™ Impregum™ L DuoSoft™ Quick (LB)	Monofase										
	1-stap	✓	✓	✓	✓	✓					
Normaal uithardende afdrukmaterialen											
3M™ Impregum™ Penta™ Soft (MB) 3M™ Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ (HB) 3M™ Impregum™ Penta™ L DuoSoft™ (LB) 3M™ Impregum™ Garant™ L DuoSoft™ (LB) 3M™ Impregum™ Penta™ (MB)	Monofase										
	1-stap						✓	✓	✓	✓	
Monofase						✓	✓	✓	✓		


Alles wat u nodig heeft voor eenvoudig afdrukken.



Retractie

3M™ Astringent Retraction Paste

Snelle en zachte manier van retractie van gingivaal weefsel en het controleren van bloedingen.




Mengen & ompspuiten

3M™ Intra-Oral Spuit Paars

Praktisch wash materiaal aanbrengen met extreme precisie en minder verspilling.

3M™ Pentamix™ 3 Automatisch mengapparaat

Luchtbel-vrij mengen van afdrukmetaal op hoge snelheid.



Afdrukken

3M™ Impregum™ Polyether Afdrukmetaal

Ongeëvenaarde precisie voor perfect passende restauraties met minder herkansingen.

Nieuwe Impregum™ Super Quick materialen

Supersnelle 2-minuten uitharding voor indrukwekkende precisie in kleinere casussen.

3M™ Afdruklepel

Eenvoudig te individualiseren tray voor een volledige kaak met zelfklevende fleece lining. Gebruik van lepel-adhesief is niet meer nodig.

